

ScanAfia Pro vårdsäng

Finlands mest sålda vårdsäng



Produkt med 125 mm standardhjul på bilden, 125 mm dubbelhjul som tillval.

3

De viktigaste funktioner:

1. Designad för smala dörröppningar
2. Gavlar av massivt trä med avtagbar ABS-plastbotten som har hög hög ventileringsförmåga
3. Lång livslängd – de lägsta livscykelkostnaderna på marknaden

ScanAfia Pro vårdsäng lämpar sig för många olika vårdmiljöer och används av många yrkesverksamma på vårdhem över hela Finland tack vare dess långa livslängd, tillförlitlighet och användarvänlighet. Sängens mångsidiga inställningar och tillbehör främjar säker rehabilitering och välbefinnande för patienten och underlättar vårdpersonalens arbete.

Sängbotten är av hygienisk ABS-plast med ventileringsöppningar. I denna bottenlösning behåller skummadrassen sina egenskaper bättre än en traditionell nätbotten. Bottenplattorna kan enkelt tas bort för desinfektion.

Kollektion


- ScanAfia Pro HS 280/290: tvådelad sovyta med elmanövrerad höjd- och ryggjustering
- ScanAfia Pro HS 480/490: fyrdelad sovyta med elmanövrerad justering av höjd, rygg-, knävecks- och fotdel

LOJER® For easy care

Tekniska data och funktioner	
Total bredd med räcken:	89 cm eller 99 cm
Total längd	216 cm
Höjjusteringsområde	36 cm – 73 cm (125 mm standardhjul) 35 cm – 72 cm (125 mm dubbelhjul)
Rekommenderad madrassstorlek	205 x 78/88 x 13 cm
Total vikt inkl. räcken	97 kg / 100 kg
Hjul:	Ø 125 mm med centrallås samt riktningshjul
Belastningsförmåga (SWL):	225 kg
Inställning av ryggdel	70°
Inställning av vaddel (endast 4-funktionsmodell)	35°
Inställning av fotdel (endast 4-funktionsmodell)	15°
Övriga standardfunktioner	Handkontroll Räcken av massivt trä med dubbellåsning med låsknapp Integrerat fäste för lyftbåge och vätskedispenserställning Manuell sänkning av ryggdel Sänggavlar: Classic bok eller Classic björk
Elsystem	24 V
CE-märkning	Ja
Tillverkningsland	Finland

Fabriksinstallerade alternativ:

- Upphöjda gavlar och sidor
- Kollisionshjul
- Ø 125 mm dubbelhjul

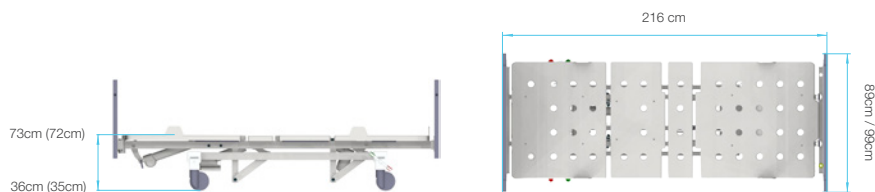

Övriga tillbehör:

- Modeller med speciallängd
- Lyftbåge
- Uppstigningsstöd
- Infusionsstav med enhandssnabbjustering
- Läslampa
- Vadderat räckskydd
- Ställning för urinpåse
- Läs- och matskiva ovanpå sängens sidor
- Låspanel för säng (patienten kan förhindras att använda funktioner)
- Ställning för handkontroll



LOJER® For easy care

© Lojer Group 2020. Alla rättigheter reserverade | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-koncernen fick sin början år 1919 när plåtslagaren Niilo Ranni grundade Vammalan Konepaja. I början reparerade man bland annat barnvagnar. I dag är företaget Nordens största tillverkare av sjukhusmöbler och våra produkter används i 115 länder.