

KINOS X

Fokusera på dina patienter



LOJER[®] *For easy care*





Kinos X5



Kinos X4

Huvudegenskaper:

1. Kan användas i liggande, rygliggande och sittande ställning
2. Robust konstruktion som även klarar de tyngsta patienterna
3. Justering med fotstång ger fria händer

Lojers behandlingsbänk Kinos X har utformats för terapeuter och yrkesverksamma som arbetar med krävande och varierande rehabilitering. Kinos X har ett brett höjjusteringsintervall, vilket gör det enkelt att justera den för olika behov. Bänken är utrustad med elektriskt höjbara hjul, en helt ny funktion, som gör den otroligt enkel att flytta runt. Lojer har arbetat mycket med design och produkttestning för att göra användarupplevelsen optimal. Behandlingsbänken Kinos X har klarat alla regulatoriska tester för medicintekniska produkter som utförts av ett externt testlaboratorium.

Sortimentet:

- Kinos X5 har en 65 cm bred tvådelad liggyta med justerbar ryggsektion. Ryggsektion och höjd justeras hygieniskt med fotstänger på båda sidor av bänken.
- Kinos X4 har en 55 cm bred hel liggyta med sidostöd. Bänkens höjd justeras hygieniskt med fotstänger på båda sidor av bänken.



Bänkens ryggsektion och höjd justeras på ett hygieniskt sätt med en fotstång, vilket gör händerna fria för att hjälpa och stödja patienten/vilket ger fria händer för att hjälpa och stödja patienten.

Lojer Kinos X behandlingsbänk är robust och stadig med hög säker arbetsbelastning/Safe Working Load (SWL)




Den antimikrobiella klädseln FUTURE är ISO-certifierad. Materialet är lätt att rengöra och sex gånger mer hållbart än konstläder.



Tekniska data och egenskaper

Modell	X4	X5
Total bredd	55 cm	65 cm
Total längd	203 cm	203 cm
Total vikt	98 kg	109 kg
Höjjustering	46 - 95 cm	46 - 95 cm
Längd på ryggsektion	-	52 cm
Justering ryggsektion	-	0 - 70°, elektrisk
Justering huvudsektion/huvuddyna	-90°...+35° (U-modell)	-90°...+35° (U-modell)
Hjul	Ø65 mm, elektriskt höjbara	Ø65 mm, elektriskt höjbara
Övriga standardfunktioner	Säkerhetsfunktioner: automatisk lyftning i nödsituationer Bänken låses automatiskt efter 120 minuter om den inte används Motorerna drar inte, utan sänks med hjälp av gravitationen Armstöd Sidostöd En lång fotstäng på båda sidor av bänken för höjjustering Elektriskt höjbara hjul	Säkerhetsfunktioner: automatisk lyftning i nödsituationer Bänken låses automatiskt efter 120 minuter om den inte används Motorerna drar inte, utan sänks med hjälp av gravitationen Armstöd Två fotstänger på båda sidor av bänken för justering av höjd och ryggsektion Elektriskt höjbara hjul Gjuten plugg för huvuddelen
Klädsel	Material Future, färg Carbon	Material Future, färg Carbon
Ramfärg	Carbon	Carbon
Safe working load (SWL)	210 kg	210 kg
Elsystem	24V, IPX6	24V, IPX6
CE-märkning	Ja, MDR-godkänd	Ja, MDR-godkänd
Garanti	2 år	2 år
Tillverkningsland	Finland	Finland

Kinos X4

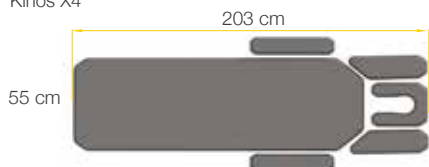

Kinos X5

